

استخدام محقنة لتنفيس أنبوب-G

يُرجى الاتصال 1-800-755-4704 إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف. متواجدون على مدار 24 ساعة، وخلال 7 أيام بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائماً برقم 911.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:



<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

التجهيزات:

- محقنة 60 مل
- موصل "Y"

الإجراءات:

1. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل. جمع التجهيزات.
2. ضع موصل "Y" في أنبوب التغذية.
3. ضع الأنبوب الممتد من كيس التغذية في جانب واحد من "Y".
4. ضع محقنة ذات طرف قسطرة 60 مللي دون المكبس في الجانب الآخر من منفذ Y. ولا بد من إبقاء محقنة التنفيس مرتفعة بمقدار 4-6 بوصات فوق المعدة لتجنب تأثير السيفون. لف الشريط حول الجزء العلوي من المحقنة، ما يسمح بشريط كاف لعمل علامة تنويب يمكن تثبيتها على ملابس الرضع أو تعليقها من سكة سرير الأطفال.
5. سيُطلب من بعض المرضى أن يظلوا منبذين في جميع الأوقات، بينما قد يتم تنفيس البعض الآخر بعد الرضاعة ثم يتم تثبيتها. اتبع الأوامر الوارد من الطبيب.

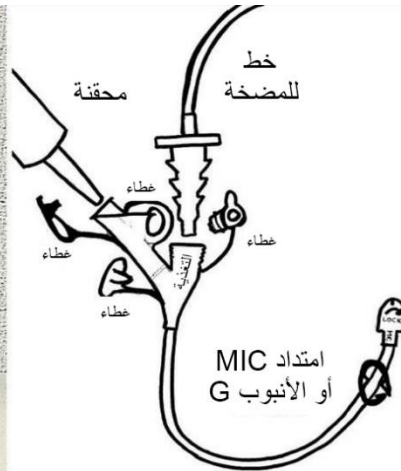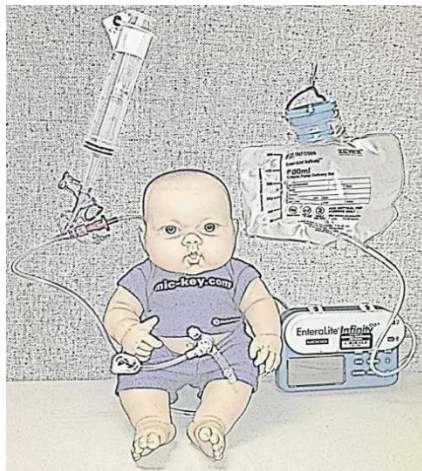



ملاحظات: